

HIGH-END SEBÉSZETI ÉS PARODONTOLÓGIAI MŰSZEREK

MŰSZERKÉSZLET PERIIMPLANTITIS MEGELŐZÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ

Periimplantitis – Az egyik legnagyobb kihívás az implantációs fogászatban. De van rá megoldás!

A Köhler műszerkészlet biztonságot és precizitást nyújt az implantátumok tisztításában és karbantartásában, annak felszíne vagy a szövetek sérülése nélkül.

Vizsgálja meg a sulcust és mérje fel a fogkövet

Impla-Safe szonda a szöveti zárás sérülésének elkerüléséhez



nincs fogkő

fogkő jelenléte

Távolítsa el a fogkövet az **Impla-Safe Soft kürettel**. * csak a felépítmény felszínéről – az implantátum menetén soha



Felesleges cement feltárása

Impla-Safe cement szonda



nem detektálható

cementmaradék jelenléte


Pattintsa le a cementet az **Impla-Safe cement eltávolítóval**



Szubgingivális átöblítés fiziológiás sóoldattal

Implantátum felszín fényesítése

Impla-Safe mikrocspesz a fiziológiás sóoldattal átitatott géz benyomásához a szulkuszb

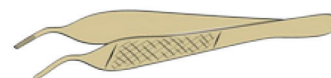

mechanikai

kémiai

Kontakt

érintésmentes

nem szelektív toxicitás

szelektív / nem toxikus


Pl. vízsugár

Pl. Chlorhexidine [CHX]

Pl. sóoldat

abrazív
Pl. titánium kefe

non-abrazív
Pl. finom polimer kefe

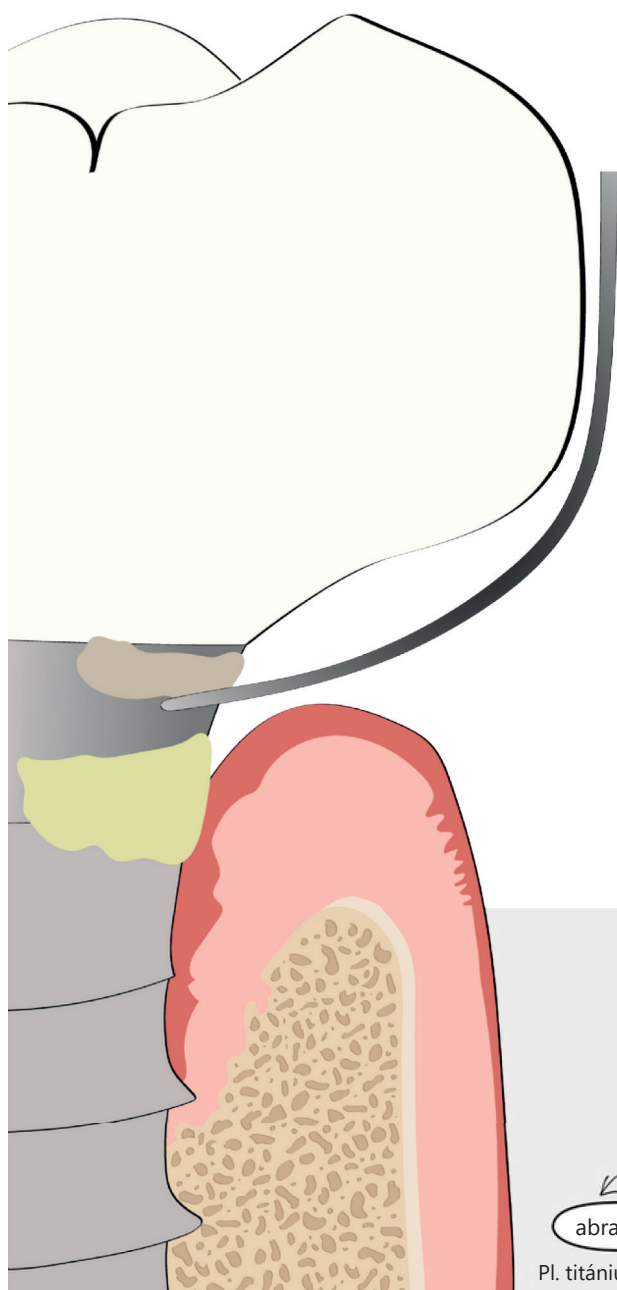

HIGH-END SEBÉSZETI ÉS PARODONTOLÓGIAI MŰSZEREK

Impla-Safe eszközök a periimplantitis megelőzésére és minimál invazív kezelésére – Dr. George Kotsakis ajánlásával

- 1 Az implantátum körüli állapot felmérése: Használja a rugalmas szondát a parodontális státusz méréséhez és a fogkö megtalálásához, taktilis visszajelzést biztosítva a szövetkárosodás elkerülése érdekében.
- 2 Látható fogkö eltávolítása: A titán kürett segítségével óvatosan távolítsa el a látható fogkövet az implantátum felépítményéről a felszín károsítása nélkül.
- 3 Felesleges cement megkeresése: A cementkereső szonda azonosítja az implantátum körüli felesleges cementet, ami gyulladáshoz vezethet.
- 4 A felesleges cement eltávolítása: Ha cementmaradványt talál, a titánium végű cementeltávolító hatékonyan, egyetlen mozdulattal eltávolítja azt.
- 5 Az implantátum felszínének polírozása és a biofilm eltávolítása: Használja a titánbevonatú mikrocspeszt és sóoldattal átitatott gézzel polírozza az implantátum felszínét és távolítsa el a biofilmet, majd öblítse ki a sulcus-t.

Az implantátum-specifikus eszközök használata minimalizálja a periimplantáris szövetek és a fogászati implantátum károsodását, ami jobb klinikai eredményekhez vezet, és segít biztonságot és bizalmat teremteni a fogorvos és a páciens között.

SET NO: 8341

1

3310

Impla-Safe parodontális szonda CP15, flexibilis, titánium véggel



2

3313

Impla-Safe kürett $\frac{3}{4}$ titánium véggel



3

3311

Impla-Safe cement szonda titánium véggel



4

3312

Impla-Safe cement eltávolító titánium véggel



5

3314

Impla-Safe mikrocspesz, ZrN bevonattal



9218

Tüköryél (tükörszem nélkül)



5597

Tükörszem #4, kétoldalas, ródium bevonattal (6db)



7600-BL

Opcionális

Műszertálca keresztszorítóval 6 műszerhez



Tudj meg többet a Köhler műszerekről!

Az **Impla-Safe** az első teljesen implantátum-specifikus műszerkészlet az implantátum környékének tisztításához, valamint az implantátum környéki gyulladás megelőzéséhez és nem sebészi kezeléséhez. A rugalmas szondától a lágy titánötvözetből készült műszerekig, amelyek implantátumspecifikus tényezőket, például a cement-maradványokat célozzák, ez a készlet kezeli a fogászati eszközök és a fogköeltávolítás által okozott implantátum-károsodást egy tapasztalaton alapuló munkafolyamat segítségével. Szerepe esszenciális lenne a fogászati implantátumokkal rendelkező betegek kezelésében.

